

RENEVE
M O N A C O

Cellular Stimulation



RENEVE
M O N A C O



ENDOTHERM

LA BIORIVITALIZZAZIONE CELLULARE

RIMODELLARE - RIDEFINIRE - RASSODARE
VISO E CORPO

CLINICAL
BEAUTY
CONCEPT



CONTRASTA GLI EFFETTI DEL TEMPO


Efficace contro il rilassamento cutaneo e le
rotondità localizzate resistenti a sport e diete

3 forme di energia sinergiche e complementari
per effettuare una vasta gamma di trattamenti
viso e corpo:

**RADIOFREQUENZA
ELETTOPORAZIONE
MICROFACE**

La tecnologia ENDOTHERM propone un gran numero
di programmi differenziati per distretti corporei con una
selezione in grado di offrire il miglior mix possibile.

ENDOTHERM

Cellular Stimulation 

LA BIORIVITALIZZAZIONE CELLULARE

LA RADIOFREQUENZA

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



I FIBROBLASTI: GLI ARCHITETTI DELLA BELLEZZA

COLLAGENE

MANTIENE IL TONO CUTANEO

ELASTINA

GARANTISCE ELASTICITÀ

ACIDO IALURONICO

CREA IDRATAZIONE E VOLUME

ENDOTHERM emette frequenze programmabili variabili da 0,5 MHz a 1 MHz con tecnologia di trasferimento monopolare, bipolare, multipolare, capacitiva e resistiva.

Il generatore di RF crea una differenza di potenziale tra il manipolo e la persona in trattamento determinando un movimento alternato di cariche elettriche, con conseguente aumento uniforme della temperatura sottocutanea.

Durante il trattamento il calore endogeno crea un aumento della temperatura uniforme dagli strati più profondi della pelle a quelli più superficiali e determina una forte attivazione del metabolismo cellulare.

NUOVA GIOVINEZZA PER IL VISO ED IL CORPO

STIMOLAZIONE DEI FIBROBLASTI

I fibroblasti creano le sostanze fondamentali del derma per assicurare giovinezza e splendore della pelle. L'effetto biologico del calore profondo stimola i fibroblasti alla sintesi di nuovo collagene, elastina e acido ialuronico con conseguente distensione dei tessuti, riduzione della lassità cutanea e riempimento della pelle per un eccezionale effetto lifting naturale.


STIMOLO DEL MICROCIRCOLO

L'azione termica migliora la microcircolazione con azioni evidenti sulla cellulite e l'adipe localizzato.

Il maggiore afflusso sanguigno attiva il drenaggio e rimuove le tossine accumulate.

LIPOLISI

Il calore profondo crea uno stimolo fisiologico agendo nel cuore delle cellule bersaglio: gli adipociti. La lipolisi è stimolata in modo naturale, aumentano gli scambi metabolici ed il processo di eliminazione trasforma il grasso in carburante energetico.

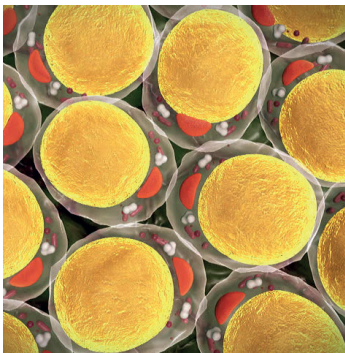

ADIPOCITI

LA RADIOFREQUENZA DI ENDOTHERM

UN VASTO NUMERO DI PROGRAMMI

VISO

Risveglia la pelle e dà nuovo splendore al viso



AZIONE MONOPOLARE

Con l'azione monopolare l'energia passa attraverso il tessuto frapposto tra il manipo e la placca passiva, per cui il calore si genera in profondità.



AZIONE BIPOLARE

L'azione bipolare è indicata per i trattamenti tonificanti del viso dove i volumi cutanei sono ridotti.

Per il trattamento bipolare sono disponibili due manipoli specifici:

- uno per il trattamento delle ampie zone del viso e décolleté
- uno per le zone specifiche del contorno occhi

CORPO

Affina e modella la silhouette



AZIONE MULTIPOLARE

Attiva il processo della lipolisi (liberazione dei grassi) in modo naturale, riduce le adiposità localizzate e la cellulite*, migliora l'aspetto e la tonicità dei tessuti.

LA RADIOFREQUENZA FRAZIONATA ESTETICA

UNA RIVOLUZIONE NEL SISTEMA DI EMISSIONE DELL'ENERGIA PER TRATTAMENTI CUTANEI EFFICACI E CONTROLLATI.


La radiofrequenza frazionata rigenera i tessuti tramite un'azione subtermica, generando una biostimolazione non aggressiva nel rispetto della fisiologia cellulare.



Applicata direttamente alla zona target stimola la produzione di nuovo collagene, elastina e acido ialuronico con conseguente naturale rigenerazione della pelle ed un effetto volumizzante e rassodante.

Ideale per:

- TRATTARE LASSITÀ CUTANEE
- TONIFICARE VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ
- RIDURRE LE RUGHE SUPERFICIALI E PROFONDE

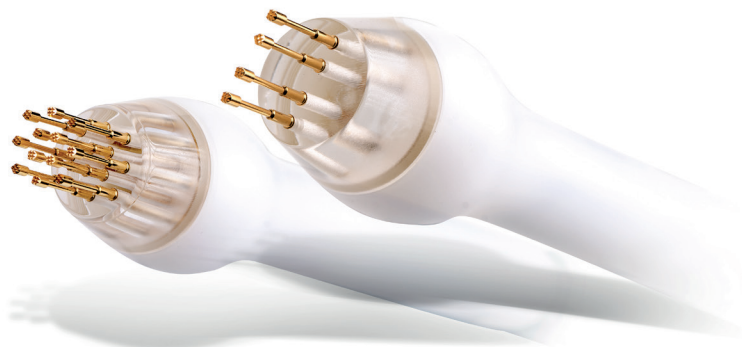

Due manipoli con
4 e 12 punte placcate oro

LA MESOPORAZIONE

LA VEICOLAZIONE TRANSDERMICA CHE FAVORISCE
L'ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI COSMETICI.

La mesoporazione è una vera rivoluzione nell'applicazione della cosmetica professionale, una nuova forma di penetrazione dei principi attivi in profondità, in modo non invasivo, rapido, sicuro ed efficace.

La mesoporazione è una scoperta straordinaria che sfrutta l'intuizione di biologi americani, secondo la quale un impulso elettrico di speciali correnti oscillo-modulate provoca una polarizzazione della membrana cellulare, rendendola più permeabile grazie all'apertura di particolari canali detti "elettropori".

Principi attivi idrosolubili vengono veicolati direttamente alle cellule interessate innescando così un reale processo di ringiovanimento cutaneo.



I VANTAGGI DELLA MESOPORAZIONE DI ENDOTHERM

- AZIONE PIÙ POTENTE: VEICOLAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO DIRETTAMENTE NEL COMPARTO EXTRACELLULARE
- MAGGIORE EFFICACIA DEI PRINCIPI ATTIVI COSMETICI
- PROFONDITÀ DI AZIONE



I MESOCOSMETICI

La bioingegneria Reneve ha creato la tecnologia per la veicolazione dei principi attivi, la cosmetologia Reneve ha selezionato gli ingredienti più idonei.

Prodotti mirati ad altissima concentrazione permettono di trasportare in profondità le preziose molecole naturali appositamente selezionate e testate per garantire il massimo risultato ottenibile.

MICROFACE

La ginnastica attiva dei tessuti

Speciali microcorrenti tonificano e modellano l'ovale del viso e riducono le rughe con un effetto giovinezza immediato.



TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

Specifici programmi viso e corpo permettono di effettuare una vasta gamma di trattamenti combinando le energie della radiofrequenza, della mesoporazione e del microface alle specifiche manualità dell'operatore estetico.



ANTI-AGE VISO

- RIDUZIONE DELLE RUGHE
- PELLE LUMINOSA E PIÙ GIOVANE
- RITROVATI VOLUMI DEL VISO



MODELAGE CORPO

- AFFINA E MODELLA LA SILHOUETTE
- RIDUCE L'ADIPE LOCALIZZATO E LA CELLULITE*
- TONIFICA I TESSUTI.

*inestetismi della cellulite



Cellular Stimulation



ENDOTHERM

LA BIORIVITALIZZAZIONE
CELLULARE

CARATTERISTICHE GENERALI

TENSIONE NOMINALE	80 ÷ 264VAC
FREQUENZA NOMINALE	47 ÷ 63Hz
POTENZA MASSIMA	450VA
CLASSE DI SICUREZZA	II BF
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP40
PROTEZIONE SOVRACORRENTE	2x 6.3A fuse
DISPLAY	7" - 800x480

RADIOFREQUENZA

FUNZIONAMENTO	TRANSDERMICO E FRAZIONATO
TIPO EMISSIONE	CAPACITIVO / RESISTIVO
POLARITÀ EMISSIONE	UNIPOLARE / BIPOLARE
MASSIMA POTENZA EROGATA (CAPACITIVA)	50W @ 50 OHM
MASSIMA POTENZA EROGATA (RESISTIVA)	25W @ 50 OHM
FREQUENZA	0.5MHZ ÷ 1MHZ (BY SOFTWARE)

MESOPORAZIONE - MICROCORRENTI

TENSIONE MAX IN USCITA	75V @ 1000 Ohm
FREQUENZA DI EMISSIONE	1 ÷ 3000 Hz

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONI DISPOSITIVO	ALTEZZA 27 cm, LARGHEZZA 43 cm, PROFONDITÀ 40 cm
PESO	7 Kg

AMBIENTE DI UTILIZZO

	Condizioni di utilizzo	Condizioni di conservazione e trasporto
Temperatura ambiente	Da 0°C a +40°C	Da -10°C a +70°C
Umidità ambiente	Da 30% a 75% senza condensazione	Max 95%
Pressione	Da 700 hPa a 1060 hPa	Da 500 hPa a 1060 hPa

RENEVE
M O N A C O

www.reneve.com

RENEVE è partner ufficiale di:

ABCLINIC
ART & BEAUTY
Clinic Lémanic

CE
THERMES MARINS
MONTE-CARLO

Azienda certificata
ISO 9001 e ISO 13485

MONTE-CARLO ESTHETICS

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MEDICAL CONCEPT SRL

Viale F.de Blasio Ang.Viale G.Lindemann Bari (BA), 70132 - tel 080 9249001 - email: info@reneve.it